


S'accorde avec vous spontanément

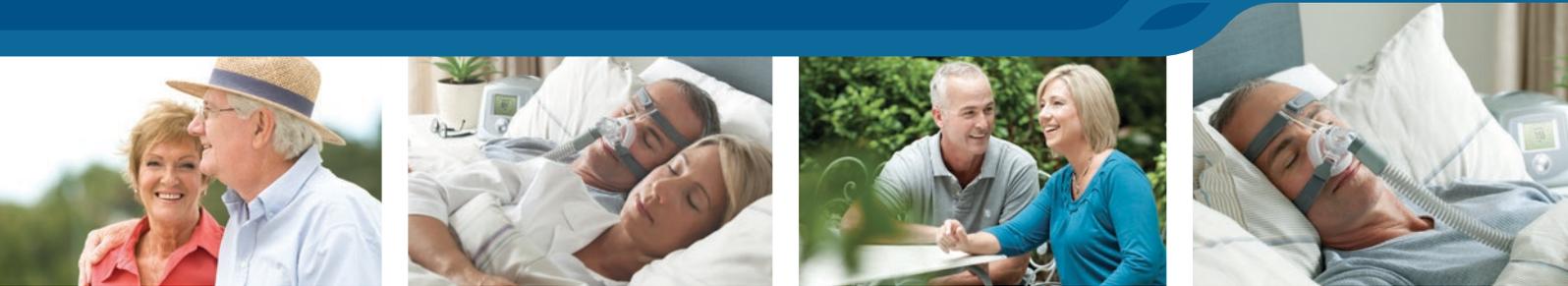

MASQUE NASAL **F&P ESON**

Le masque F&P Eson est conçu pour s'adapter facilement à vous et à vos besoins.

Trois éléments de masque profilés, de petite taille, fonctionnent de concert pour des performances supérieures, une meilleure stabilité et un confort inégalé. Ce masque nasal compact intègre des innovations technologiques pour vous assurer une vie de sommeil harmonieux.



Confort



Étanchéité



Utilisation facile

F&P Eson est facile d'emploi. Pré-assemblé, il a été conçu pour s'adapter à tous les aspects de votre sommeil* : F&P Eson vous assure un confort optimal en toute simplicité, avec peu de manipulations, de réglages et de pièces, et ce avec un niveau sonore réduit.

SIMPLICITÉ POUR LES PROFESSIONNELLS DE SANTÉ ET LES LABORATOIRES DU SOMMEIL

SIMPLICITÉ POUR LES PATIENTS ET LEUR PARTENAIRE

Mise en place facile




La technologie innovante de mise en place intuitive permet une adaptation simple et rapide par les patients.

Les crochets Easy-Clip permettent une mise en place et un retrait rapides.


Un masque facile à nettoyer et à remonter grâce à ses trois éléments simples.

Un design innovant pour un confort optimal et une étanchéité stable et efficace tout au long de la nuit.

Un masque silencieux avec une diffusion d'air minimale pour assurer un sommeil paisible à vous et à votre partenaire.

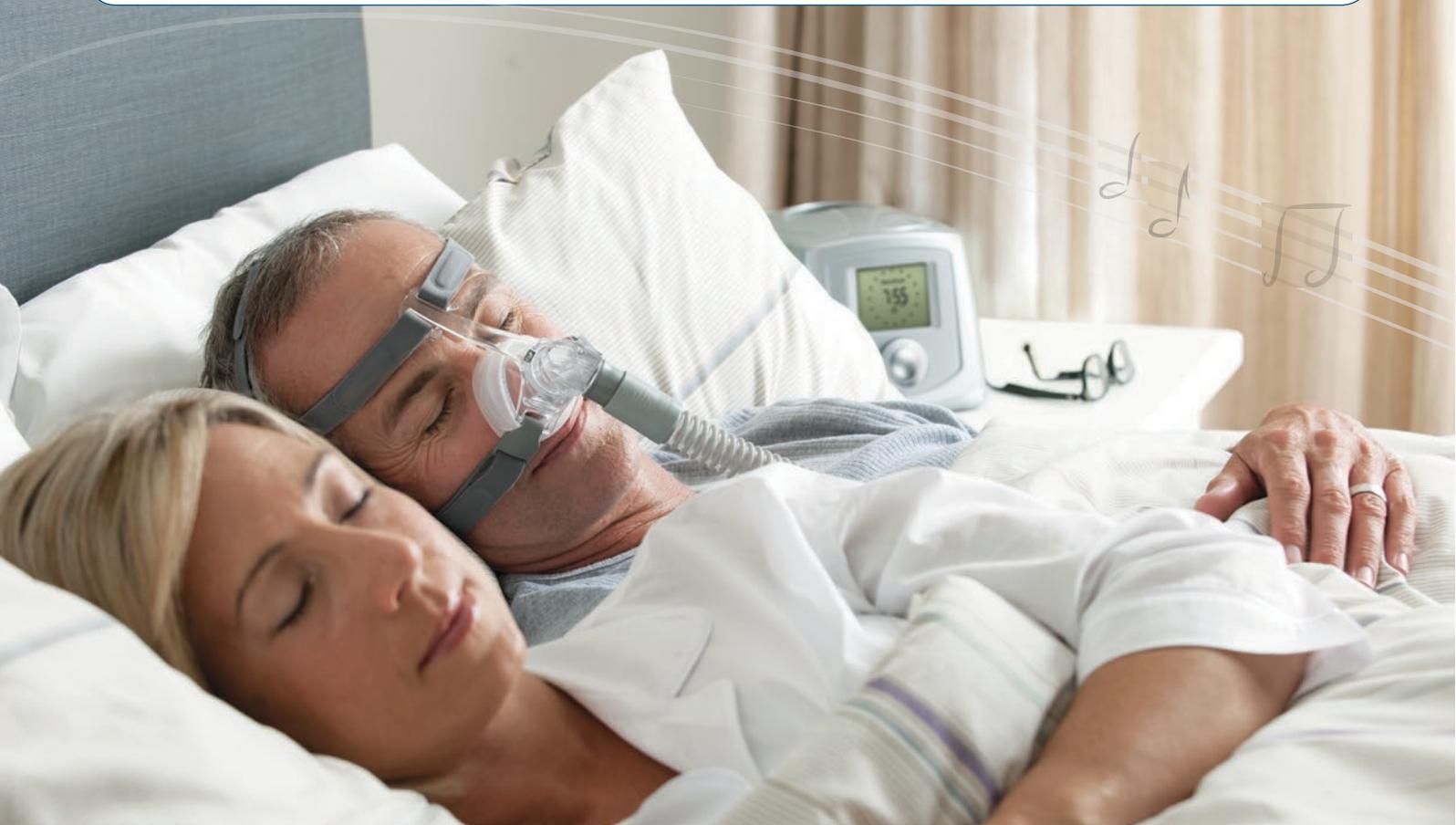

Les trois composants simples du masque F&P Eson, **la jupe RollFit™, le harnais ErgoFit et le cadre Easy Frame**, agissent de concert pour vous assurer le confort, l'étanchéité et la facilité d'utilisation qui font la réputation des masques Fisher & Paykel Healthcare.

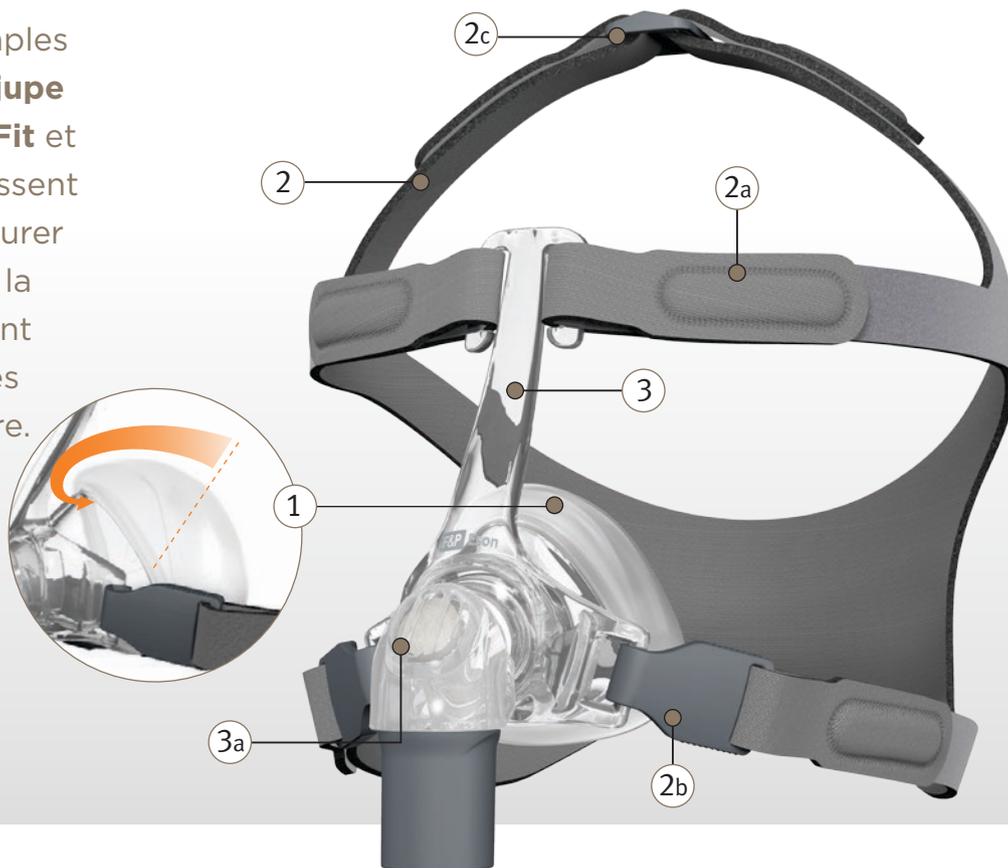

Confort



Étanchéité



Utilisation facile

1. Jupe RollFit

Ajustement simple optimisant une étanchéité efficace et confortable

Cette jupe, en une seule pièce, glisse sur l'arête du nez pour un ajustement optimal. La **technologie RollFit** réduit ainsi la pression exercée sur l'arête nasale.

La **jupe RollFit intègre des stabilisateurs pour une** étanchéité et une stabilité optimales.

2. Harnais ErgoFit

Simple à utiliser, à placer, à ajuster et à nettoyer

Ce harnais ergonomique a été conçu pour se placer très haut à l'arrière de la tête pour permettre des mouvements amples (sur les côtés, vers le haut et vers le bas) sans que le masque bouge.

Le **harnais ErgoFit** intègre aussi des **bandes VELCRO®*** (2a) avec **crochets Easy-Clip** (2b) pour une mise en place et un retrait simples et rapides.

La sangle ajustable **Crown Strap** (2c) stabilise le masque.

* VELCRO® est une marque déposée de Velcro Industries B.V.

3. Easy Frame

Facile à porter, ne gêne ni la vision ni le sommeil

Cette coque profilée, stable et résistante et de petite taille, libère le champ de vision.

Une seule taille de coque s'adapte aux trois tailles de jupe et la coque est dotée d'une fixation « **Easy-Clip** » pour un remontage simple après nettoyage.

La coque **Easy Frame** est équipée du **Q Cover** (3a) pour un fonctionnement silencieux et un flux minimal.

Le coude à rotule limite la traction du tuyau de la PPC en assurant flexibilité de mise en place et liberté de mouvement.

F&P Eson s'adapte aux besoins et souhaits des patients et de leur professionnel de santé :
Conçu pour faciliter **l'adhérence au traitement**.

Pour plus d'informations, veuillez contacter
votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare

Fabricant 

Fisher & Paykel Healthcare Ltd
15 Maurice Paykel Place
East Tamaki, Auckland 2013

PO Box 14 348 Panmure
Auckland 1741
Nouvelle-Zélande

Tél. : +64 9 574 0100
Fax : +64 9 574 0158
Courriel : info@fphcare.co.nz
Site Internet : www.fphcare.com

Australie

Fisher & Paykel Healthcare Pty Limited
36-40 New Street, PO Box 167
Ringwood, Melbourne
Victoria 3134, Australie

Tél. : +61 3 9879 5022
Fax : +61 3 9879 5232

Autriche

Tél. : 0800 29 31 23
Fax : 0800 29 31 22

Benelux

Tél. : +31 40 216 3555
Fax : +31 40 216 3554

Chine

Tél. : +86 20 3205 3486
Fax : +86 20 3205 2132

France

Tél. : +33 1 6446 5201
Fax : +33 1 6446 5221

Allemagne

Tél. : +49 7181 98599 0
Fax : +49 7181 98599 66

Inde

Tél. : +91 80 4284 4000
Fax : +91 80 4123 6044

République d'Irlande

Tél. : 1800 409 011

Italie

Tél. : +39 06 7839 2939
Fax : +39 06 7814 7709

Japon

Tél. : +81 3 3661 7205
Fax : +81 3 3661 7206

Irlande du Nord

Tél. : 0800 132 189

Espagne

Tél. : +34 902 013 346
Fax : +34 902 013 379

Suède

Tél. : +46 8 564 76 680
Fax : +46 8 36 63 10

Suisse

Tél. : 0800 83 47 63
Fax : 0800 83 47 54

Taiwan

Tél. : +886 2 8751 1739
Fax : +886 2 8751 5625

Turquie

Fisher Paykel Sağlık Ürünleri
Ticaret Limited Şirketi,
P.O. Box 06371 Ostim,
Alinteri Bulvari 1161/1 Sokak
No. 12-14, Ankara, Turkey

Tél. : +90 312 354 34 12
Fax : +90 312 354 31 01

RU 

Fisher & Paykel Healthcare Ltd
Unité 16, Cordwallis Park
Clivemont Road, Maidenhead
Berkshire SL6 7BU, RU

Tél. : +44 1628 626 136
Fax : +44 1628 626 146

É-U/CANADA

Tél. : +1 800 446 3908
ou +1 949 453 4000
Fax : +1 949 453 4001

Classe du dispositif médical : Classe IIa Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de cet appareil médical.

Références de commande du masque		Références pour la commande de pièces de rechange	
400452	Masque F&P Eson - Medium/Large	400HC126	Joint F&P Eson - Small
400453	Masque F&P Eson - Small/Small	400HC127	Joint F&P Eson - Medium
400454	Masque F&P Eson - Medium/Medium	400HC128	Joint F&P Eson - Large
400455	Masque F&P Eson - Large/Large	400HC228	Diffuseur (10 pièces) et Cover F&P Eson
		400HC567	Harnais F&P Eson - Small
		400HC568	Harnais F&P Eson - Medium/Large
		400HC569	Harnais F&P Eson - Clips & boucle
		400HC570	Raccord F&P Eson